

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa aluminiowa, regulowana

Kod produktu: TGR-R RA 885




1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, regulowana wykonana z ramy aluminiowej, powlekanej farbą z metalicznym połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, tapicerowane regulowane na wysokość siedzisko, oparcie oraz podręczną torbę na zakupy. Posiada pełne koła o wąskim przekroju o średnicy 8'' z funkcją demontażu do transportu oraz regulowane na wysokość rączki zakończone anatomicznymi uchwytami. Zestaw zawiera: ramę podpórki wraz z siedziskiem, oparcie, torba z usztywnieniem na zakupy, dwa uchwyty z kołami tylnymi, koła przednie, śruba blokująca- 2 szt., sztyft blokujący- 2 szt.

Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. hamulec
- c. śruba blokująca (uchwyty)
- d. klips blokujący (oparcie)
- e. oparcie
- f. siedzisko
- g. torba
- h. sztyft blokujący (koła tylne)
- i. klips blokujący (koła przednie)
- j. uchwyt na kule
- k. górna regulacja hamulca
- l. dolna regulacja hamulca

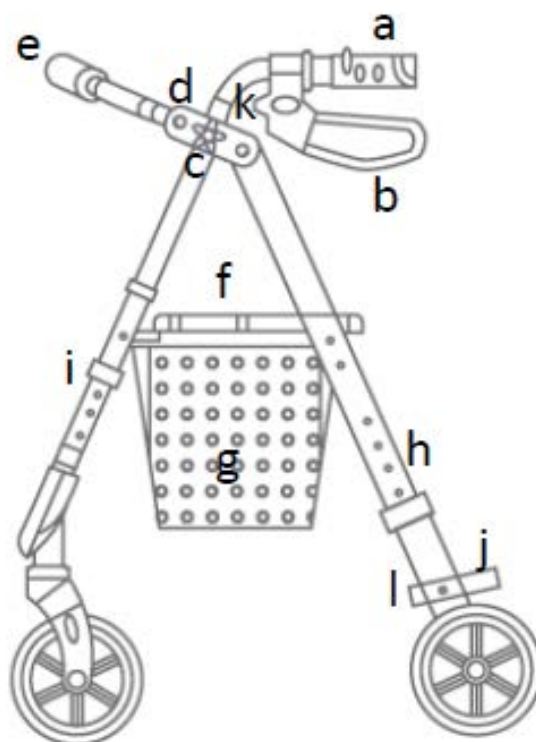

2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób

starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie podpórki

- Ramę podpórki należy rozłożyć poprzez pociągnięcie ramy na zewnątrz i dociskając siedzisko aż do całkowitego rozłożenia.
- Koła tylne wraz z uchwytami połączone są linkami hamulcowymi dlatego w pierwszej kolejności należy w otworach montażowych zamontować uchwyty i zablokować je śrubami blokującymi a następnie należy koła tylne zablokować sztyftami.
- Przednie koła należy zamontować w części przedniej ramy i zabezpieczyć je klipsami blokującymi, które znajdują się powyżej w otworach do regulacji wysokości.
- Oparcie należy zamontować w górnej części ramy i zablokować sztyftami blokującymi.
- Należy zdjąć plastikowe ochraniacze z kół. Aby złożyć podpórkę należy podnieść siedzisko i podciągnąć do góry belkę znajdującą się pod siedziskiem.

Funkcja hamulców

Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwyty, następnie przytrzymać. W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół. Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

Regulacja wysokości uchwytów

Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy odkręcić śrubę blokującą znajdującą się na zewnętrznej stronie ramy, następnie wybrać odpowiednią wysokość i zablokować położenie dokręcając śrubę blokującą. Uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.

Regulacja wysokości siedziska

Aby wyregulować wysokość siedziska należy wyciągnąć klips blokujący (do montażu kół przednich) oraz docisnąć sztyft blokujący (do montażu kół tylnych), następnie należy wybrać odpowiednią wysokość siedziska i zablokować koła klipsem oraz sztyftem blokującym.

Regulacja hamulców: Górna regulacja hamulca: Należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej. **Dolna regulacja hamulca:** Należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować napięcie linki, następnie należy dokręcić śrubę mocującą.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	65 cm
Głębokość całkowita	69 cm
Wymiary siedziska	40 cm x 25,5 cm
Wysokość siedziska od podłoża	63 cm
Regulacja wysokości uchwytów	90-100 cm
Waga	6,8 kg
Max obciążenie	130 kg
Max obciążenie torby na zakupy	5 kg
Kolor ramy	grafitowy

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja










Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać

zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021