1. Przeznaczenie

Variteks REF 900 jest przyrządem przeznaczonym do ułatwiania zakładania **skarpet, pończoch uciskowych, przeciwżylakowych oraz przeciwzatorowych**.

Jest szczególnie pomocny dla osób, które mają trudności ze schylaniem się, sięganiem do kostki lub stopy albo z naciąganiem mocno uciskającego materiału. Może być stosowany m.in. przez osoby starsze, osoby z ograniczoną ruchomością oraz w okresie rekonwalescencji po zabiegach.


2. Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem:

1. Wyjmij przyrząd z opakowania.
2. Sprawdź, czy metalowa konstrukcja nie jest uszkodzona ani odkształcona.
3. Upewnij się, że pończocha jest odpowiednio dobrana do nogi i zgodna z zaleceniami.
4. Przy zakładaniu pończochy usiądź w stabilnej i bezpiecznej pozycji.

3. Zakładanie pończochy

Krok 1 – umieszczenie pończochy na przyrządzie

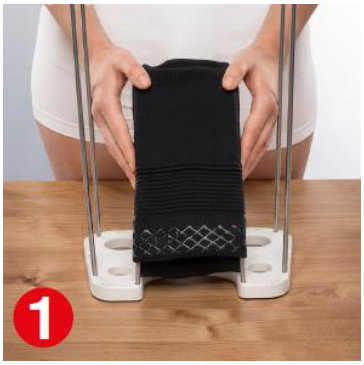

Umieść zwiniętą pończochę na środkowej, półokrągłej części przyrządu.

Następnie przesuwaj zwiniętą część pończochy w dół. Pozostaw około **20 cm materiału zwisającego poniżej środkowej części przyrządu**. Tak przygotowana pończocha powinna umożliwić swobodne wsunięcie stopy.

Krok 2 – wsunięcie stopy



Wsuń stopę w otwór pończochy, umieszczając ją możliwie centralnie w przygotowanym miejscu.

Upewnij się, że palce i pięta znajdują się prawidłowo wewnątrz pończochy.

Producent: Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş.
Ferhatpaşa Sb. Mah. Menekşe Sk. Variteks Blok No:3 İç Kapı No:Z1, 34540 Çatalca - İstanbul/Türkiye
info@variteks.com

Krok 3 – podciąganie pończochy



Chwyć oba boczne uchwyty przyrządu i **unieś je jednocześnie do góry**.

Podczas unoszenia uchwytów pończocha będzie przesuwać się po stopie i nodze.

Kontynuuj ruch do momentu, aż pończocha znajdzie się na właściwej wysokości.

Krok 4 – zakończenie zakładania



Gdy pończocha zostanie założona, delikatnie odsuń i wyjmij przyrząd spod nogi.

Sprawdź ułożenie pończochy. Materiał powinien być równomiernie rozłożony i nie powinien być skręcony ani zwinięty.

4. Ważne zasady użytkowania

- Nie szarp przyrządem ani pończochą.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas podciągania.
- Nie ciągnij pończochy punktowo za pojedynczy fragment materiału.
- Pończocha powinna być założona równomiernie, bez fałd i skręceń.
- W przypadku bólu, drętwienia, nadmiernego ucisku lub innych niepokojących objawów należy przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem lub specjalistą.
- Jeżeli pończocha jest uszkodzona, nie należy jej zakładać przy pomocy przyrządu.

5. Czyszczenie i przechowywanie

- Przyrząd można czyścić przy użyciu **miękkiej ściereczki oraz łagodnego detergentu**.
- Po umyciu dokładnie wytrzyj przyrząd do sucha.
- Nie stosuj środków ani materiałów ściernych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię metalowej konstrukcji.
- Przechowuj przyrząd w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł wysokiej temperatury.

6. Kontrola przed użyciem

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan przyrządu. Nie używaj go, jeżeli:

- konstrukcja jest wygięta lub uszkodzona,
- występują ostre lub wystające elementy,
- elementy przyrządu są poluzowane,
- uszkodzenie może spowodować zaczepienie lub uszkodzenie pończochy.

Variteks REF 900 jest przeznaczony wyłącznie do ułatwiania zakładania wyrobów uciskowych. Nie zastępuje prawidłowego doboru pończochy ani zaleceń lekarza dotyczących jej stosowania.

Importer: Technoana Kraśnik Górny 22, 59-700 Bolesławiec Tel: 75 735 17 22
biuro@technoana.com.pl

Producent: Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş.
Ferhatpaşa Sb. Mah. Menekşe Sk. Variteks Blok No:3 İç Kapı No:Z1, 34540 Çatalca - İstanbul/Türkiye
info@variteks.com